

UnixProMed

ТУ 14.19.32-947-05795731-2020

Комбинезон защитный UnixProMed



Назначение

Комбинезон UnixProMed (далее по тексту - комбинезон) предназначен для индивидуальной защиты медицинского персонала от внешнего инфицирования. Комбинезон относится к специальной защитной одежде краткосрочного применения.


Применение

Комбинезон применяется в амбулаторных, стационарных и лабораторных лечебно-профилактических учреждениях, включая инфекционные, в домашних условиях и в местах массового скопления людей (улицы, транспорт, общественные организации). Комбинезон надевается поверх одежды, препятствуя незначительным загрязнениям и механическому повреждению одежды и создавая барьер для влаги, ворса, пуха, мелкодисперсной нетоксичной пыли, аэрозолей.

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

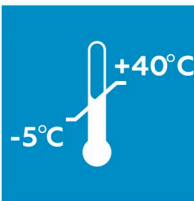

Состав

Комбинезон изготавливается с капюшоном из воздухопроницаемого, легкого и прочного нетканого полипропиленового материала, инертного к щелочам и кислотам, не подверженного воздействию плесени и грибка.

Комбинезон снабжен молнией со специальной защитной планкой и эластичными резинками по вырезу для лица на капюшоне, линии талии со стороны спины, низу рукавов и брюк, изготавливается пяти размеров.

Комбинезон может применяться совместно с другими средствами индивидуальной защиты рук, ног, головы и органов дыхания.

Варианты исполнения

Комбинезоны изготавливают в двух вариантах в зависимости от плотности материала:

- ✓ комбинезон UnixProMed Lite с плотность материала 30-40 г/м² – более легкий с большой воздухопроницаемостью материал;
- ✓ комбинезон UnixProMed Plus с плотность материала 60-80 г/м² – более высокая стойкость к истиранию, большая разрывная нагрузка и большая водоупорность материала.

Размерный ряд комбинезона

Обозначение размера	Рост человека, см	Обхват груди человека, см
M	170 – 176	92 – 96
L	176 – 182	100 – 104
XL	176 – 182	108 – 112
XXL	182 – 188	116 – 120
XXXL	188 – 194	124 – 128

Масса комбинезона – не более 300 г

Срок годности

Комбинезон применяется однократно и не подлежит техническому обслуживанию и ремонту. Срок годности зависит от степени загрязнения комбинезона и целесообразности дальнейшего его использования. Рекомендуемое время использования: 8-12 часов.

Стерилизация

Комбинезон нестерилизуем, перед использованием не стерилизуется.

Утилизация

Комбинезоны после использования по назначению утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» как медицинские отходы класса Б.

Неиспользованные комбинезоны должны быть утилизированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 как медицинские отходы класса А. Возможна утилизация с бытовыми отходами.

Гарантийный срок хранения

Рекомендуемый срок хранения в упаковке организации-изготовителя - 6 лет с даты изготовления.

Разрешающие документы к использованию

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/10174 допускает медицинское изделие Комбинезон защитный UnixProMed по ТУ 14.19.32-947-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации.

Производитель

АО «Сорбент»